


MODALITA' CAMPIONAMENTO FECI PER CALPROTECTINA ED ELASTASI

Il Device Calprotectin LIAISON Q.S.E.T. Device Plus contiene un liquido a volume definito.

MODALITÀ DI RACCOLTA FECI:

- Il campionamento può essere eseguito solo in presenza di feci solide, quindi si devono scartare feci liquide, ematiche o mucose.
- predisporre un contenitore pulito in cui raccogliere le feci;
- **non contaminare con urine o sangue mestruale;**
- svitare il tappo BLU del flaconcino ed estrarre l'asticella di campionamento fissata sul tappo. **ATTENZIONE, non rovesciare il contenuto liquido del flaconcino.**
- Immergere la punta dell'asticella del campionatore in più punti, ruotandola;
- Verificare che le scanalature dell'asticella siano completamente coperte prima di riavvitare l'asticella sul dispositivo altrimenti ripetere l'operazione descritta al punto precedente.
- **IMPORTANTE: Non deve essere trasferito nel contenitore altro materiale che quello che rimane adeso all'asticella del campionatore.**
- Reinscrivere l'applicatore nel flaconcino e riavvitare bene il tappo; chiudere bene il contenitore e agitarlo per miscelare feci e conservante.

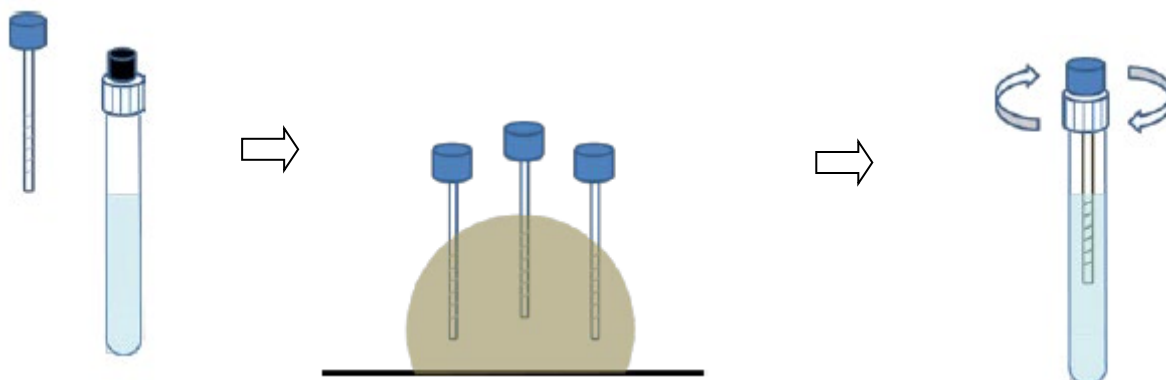

CONSERVAZIONE:

Prima della raccolta il flacone può essere conservato a temperatura ambiente.

Dopo la raccolta conservare i campioni in frigorifero

Attenzione: dopo la raccolta i campioni hanno una stabilità massima di 3 giorni.

ATTENZIONE (si riporta quanto indicato nella scheda di sicurezza dal produttore)

Tutti i reattivi contenenti materiali biologici usati per effettuare il dosaggio devono essere considerati potenzialmente in grado di trasmettere agenti infettivi.



Indicazioni di pericolo:

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

Misure di attenzione e di primo soccorso:

- Non ingerire.
- Non lasciare il contenitore alla portata dei bambini.
- Maneggiare con attenzione, conservare su superfici sicure per evitare cadute accidentali.
- **Evitare** schizzi o formazione di aerosol durante la manipolazione.
- **In caso di contatto accidentale** con la pelle lavare abbondantemente con acqua e togliere immediatamente gli indumenti contaminati.
- **In caso di contatto con gli occhi** risciacquare abbondantemente con acqua, rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a sciacquare. Rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso.
- **In caso di ingestione accidentale** rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso.

In caso di accesso in Pronto Soccorso portare con sé il presente modulo.

La Direzione del Laboratorio